




INSTRUCTIONS FOR USE
www.ostoform.com

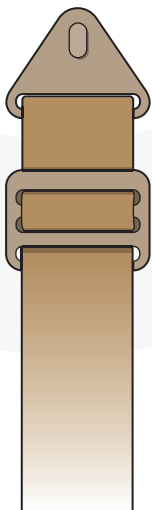

www.ostoform.com
Info@ostoform.com

IFU Ref: 04A-IFU-001-US 2023-03-10

Manufactured in Germany for: Ostoform Limited,
 Unit 5C, Fairgreen House, Saint Loman's Terrace,
 Mullingar, Co. Westmeath N91 H635, Ireland.

	REF	
Ostoform Belt	OFA-OB-120	120cm

INTENDED USE

The Ostoform belt is an accessory product designed for individuals with an ostomy. It helps to secure the Ostoform pouching system to the body by providing an extra fixing point.

WARNINGS

1. Please only use the Ostoform belt according to the instructions provided and for its intended purpose.
2. Do not dispose of this product in the toilet. Proper disposal methods should be followed.
3. If you feel any irritation or discomfort around the stoma, please discontinue using the device and consult an ostomy specialist.
4. Should a serious incident arise as a result of using this device, please report to Ostoform and the local Competent Authority.

STORAGE

Store at room temperature in dry conditions and out of direct sunlight.

SHELF LIFE

Please refer to the expiry date on device label.

WARRANTY

The product will function as intended up to the expiry date.

BELT COMPOSITION

Viscose, rubber-coated elastane, and cotton.


GLOSSARY

www.ostoform.com/symbol-glossary/




FITTING INSTRUCTIONS

1

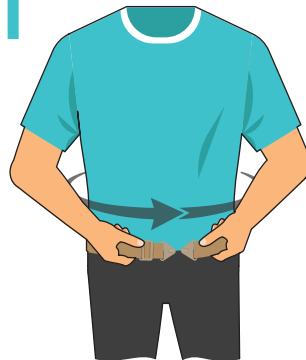


Adjust the size of the belt to comfortably fit your waist.

2

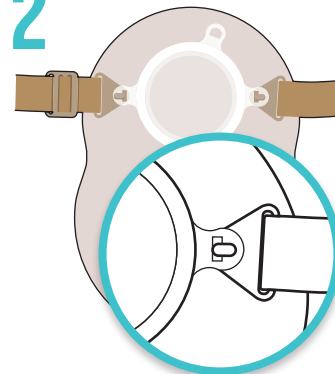


Gently stretch the belt and fasten the hook to the eyelet on the system.

3

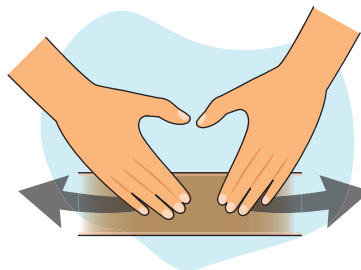

Smooth out the belt, ensuring there are no twists.

4

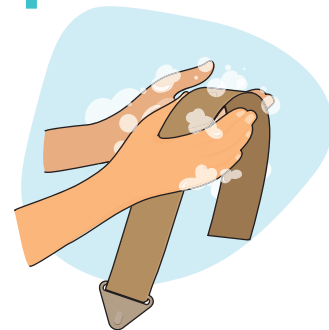


The ostomy belt should be cleaned after frequent use by hand washing with warm water (86°F/30°C).



INSTRUCCIONES DE USO

www.ostoform.com

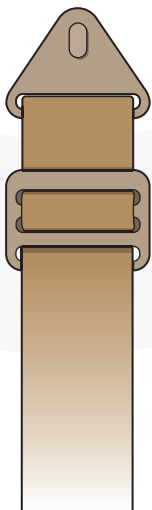

www.ostoform.com
Info@ostoform.com

IFU Ref: 04A-IFU-001-US 2023-03-10

Fabricado en Alemania para: Ostoform Limited,
Unit 5C, Fairgreen House, Saint Loman's Terrace,
Mullingar, Co. Westmeath N91 H635, Ireland.

	REF	
Ostoform Belt	OFA-OB-120	120cm

USO PREVISTO

El cinturón Ostoform es un producto accesorio diseñado para personas con una ostomía. Ayuda a fijar el sistema de bolsa Ostoform al cuerpo proporcionando un punto de fijación adicional.

ADVERTENCIAS

1. Solamente utilice el cinturón Ostoform de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y para su propósito previsto.
2. No deseche este producto en el excusado. Debe eliminarse mediante métodos adecuados.
3. Si siente alguna irritación o molestia alrededor del estoma, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su especialista en ostomía.
4. Si se produce algún incidente grave como resultado del uso de este dispositivo, informe a Ostoform y a la autoridad local competente.

ALMACENAMIENTO

Almacene a temperatura ambiente en condiciones secas y fuera de la luz directa del sol.

VIDA ÚTIL

Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta del dispositivo.

GARANTÍA

El producto funcionará según lo previsto hasta la fecha de caducidad.

COMPOSICIÓN DEL CINTURÓN

Viscosa, elastano recubierto de goma y algodón.


GLOSARIO

www.ostoform.com/symbol-glossary/




PARA UTILIZAR EL CINTURÓN

1

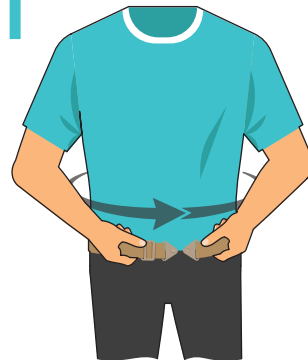


Ajuste el tamaño del cinturón para que se ajuste cómodamente a su cintura.

2

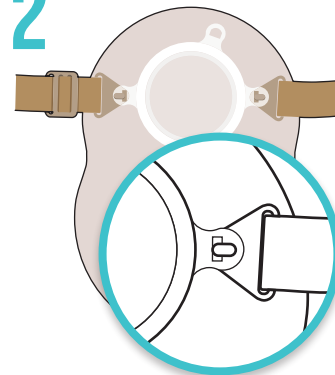

Estire suavemente el cinturón y fije los ganchos a los ojalos en el sistema.

3

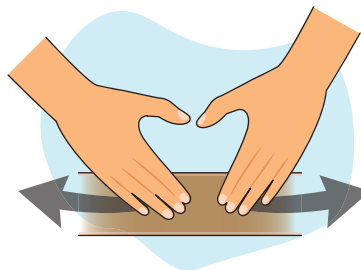

Alise el cinturón asegurándose que no quede torcido.

4



Después de un uso frecuente, el cinturón para ostomía debe lavarse a mano con agua caliente (86°F/30°C).